



ATOS

STAR 

EUROPE

Sécurité | Confort | Design
www.atos-ambulanz.at



Testé selon la norme DIN 1789, EN 1865-1



Test 20 G DEKRA
passé avec succès



ATOS

STAR 

EUROPE

Sécurité | Confort | Design

Accoudoirs intégrés

- facilitent le transfert des patients
- facilitent la fixation avec la ceinture à trois points dans le véhicule



Filet pour ranger les objets du patient



Assise XXL (53 cm)

Réglage personnalisé du repose-pieds avec 3 points de blocage



Voie plus étroite (47,5 cm)

- pour entrer plus facilement dans le véhicule





Coulisse de manière flexible



Dossier de forme ergonomique



Franchissement facile des obstacles



Se lever devient plus facile
grâce au repose-pieds
entièrement escamotable

Roulettes articulées à l'avant ou à l'arrière



ATOS

STAR



Fauteuil de transport pour les services

Version STANDARD

La coque du siège est en fibres de verre, peinte en gris RAL 7021 et dotée, à droite et à gauche, d'un accoudoir entièrement escamotable intégré dans le dossier de la coque du siège. Le transfert du patient n'en est que plus facile, sans que la stabilité de la coque de siège n'en pâtisse. Attacher le patient dans le véhicule est aussi bien plus simple grâce à la ceinture à 3 points. Une ceinture de sécurité en H est fixée de manière statique au fauteuil de transport. Le capitonnage d'assise se compose d'une housse en plastique Bravo HTIGN AST noir et est insensible aux produits désinfectants courants. Il se distingue par son poids peu élevé. Les repose-pieds sont escamotables vers l'intérieur et permettent au patient de se relever librement.

Le châssis est en aluminium et peint à la poudre en gris RAL 7021.

Variantes

ATOS STAR LH (articulée à l'arrière)

Coque de siège et châssis en RAL 7021, ceinture de sécurité statique en H noir, capitonnage noir Bravo HTIGN AST (housse en plastique), filet

ATOS STAR LV (articulée à l'avant)

Coque de siège et châssis en RAL 7021, ceinture de sécurité statique en H noir, capitonnage noir Bravo HTIGN AST (housse en plastique), filet

ATOS STAR LHV (articulée à l'avant et à l'arrière)

Coque de siège et châssis en RAL 7021, ceinture de sécurité statique en H noir, capitonnage noir Bravo HTIGN AST (housse en plastique), filet

Accessoires / options




Système de ceinture :

- Ceinture en H statique
- Ceinture en H avec système roulant automatique à g. & à d. pour la zone du bassin, le système roulant automatique est fixé sous la coque de siège.
- Sangle abdominale avec système roulant automatique



- Housse du siège en cuir synthétique : variante unie ORANGE, ROUGE, BLEU, NOIR, ou couleur souhaitée sur demande
- Variante bicolore : assise & dossier NOIR et bords ORANGE, ROUGE ou couleur souhaitée

En fonction de la variante et de l'équipement, le poids varie de 17,7 kg à 19,5 kg.

Fauteuil de transport fermé

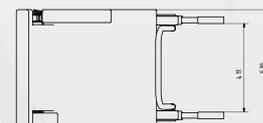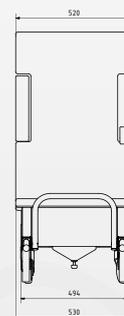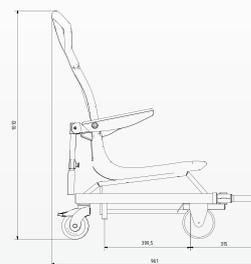

Fauteuil de transport ouvert

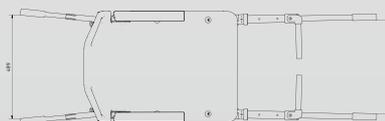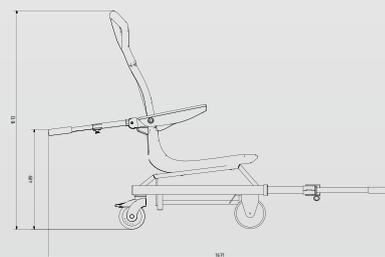

ATOS

Ambulanz Mobile

ATOS Group GmbH

4845 Rutzenmoos, Unterkriech 34

Tel.: +43 (0)7672 / 222 33

Fax.: +43 (0)7672 / 222 33 44

Contact :

Schiemer Michael

+43 (0)664 / 333 97 23

Email: office@atos-ambulanz.at