



ATOS

STAR 

EUROPA

Seguridad | Confort | Diseño
www.atos-ambulanz.at



certificado DIN 1789, EN 1865-1



20 D Test DEKRA
a p r o b a d o



ATOS

STAR 

EUROPA

Seguridad | Confort | Diseño

Apoyabrazos integrados

- facilita el traslado del paciente
- se facilita el anclaje con el cinturón de 3 puntos del lado del vehículo



Red para utensilios del paciente



Anchura del asiento XXL (53 cm)

Regulación individual del reposapiés gracias a 3 puntos de retención



Vía más estrecha (47,5 cm)

- permite entrar y salir del vehículo con más facilidad





Varias posibilidades de empujar



Respaldo con forma ergonómica



Fácil sobrepaso de obstáculos



El apoyapiés completamente plegable permite levantarse con más facilidad

Ruedas delanteras o traseras manejables



ATOS

STAR



Butaca portátil para el servicio de urgencias

Configuración estándar

El asiento de fibra de vidrio está barnizado gris RAL 7021 y tiene un apoyabrazos completamente plegable a la izquierda y derecha, que está integrado en el respaldo del asiento. Esto facilita el traslado del paciente sin perder la estabilidad del asiento. Asimismo se mejora claramente la fijación del paciente con el cinturón de 3 puntos del lado del vehículo. En la butaca portátil está fijado un cinturón H estático.

El tapizado acolchado del asiento consiste del tapizado Bravo HTIGN AST negro, es insensible hacia desinfectantes habituales y se destaca por poco peso. El reposapiés es plegable hacia dentro y facilita así que se levante libremente el paciente.

La base consiste de aluminio con recubrimiento pulverizado de color gris RAL 7021

Variantes

ATOS STAR LH (manejable atrás)
asiento y base en Ral 7021, cinturón H estático en negro,
tapizado acolchado en negro Bravo HTIGN AST (tapizado de plástico), red

ATOS STAR LV (manejable adelante)
asiento y base en Ral 7021, cinturón H estático en negro,
tapizado acolchado en negro Bravo HTIGN AST (tapizado de plástico), red

ATOS STAR LHV (manejable adelante y atrás)
asiento y base en Ral 7021, cinturón H estático en negro,
tapizado acolchado en negro Bravo HTIGN AST (tapizado de plástico), red




Accesorios/opciones

sistema de cinturones:



- cinturón H estático
- cinturón H con carrete automático izq. & der. para la pelvis, carrete automático está fijado debajo del asiento
- cinturón pélvico con carrete automático
- tapizado de cuerina: variantes unicolor en naranja, rojo, azul, negro o color deseado sobre pedido
- variante bicolor: asiento & respaldo en negro y bordes en naranja, rojo o color deseado

El peso varía según variante y equipo de 17,7 kg a 19,5 kg.

Butaca portátil cerrada

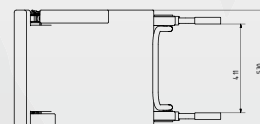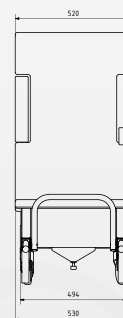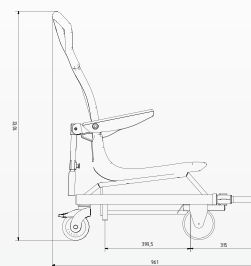

Butaca portátil abierta

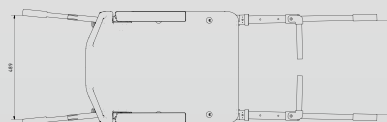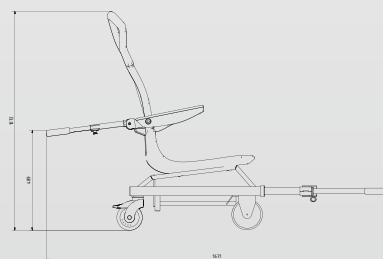

ATOS

Ambulanz Mobile

ATOS Group GmbH

4845 Rutzenmoos, Unterkriech 34

Tel.: +43 (0)7672 / 222 33

Fax.: +43 (0)7672 / 222 33 44

Contacto:

Schiemer Michael

+43 (0)664 / 333 97 23

Email: office@atos-ambulanz.at