

ATOS

STAR 

KLINIK

Sicherheit ✓ Komfort ✓ Design ✓

www.atos-ambulanz.at



geprüft nach DIN 1789, EN 1865-1

ATOS
Ambulanz Mobile

ATOS

STAR

KLINIK

Sicherheit ✓ Komfort ✓ Design ✓


www-atos-ambulanz.at

ergonomisch geformter Rückenteil



- Fach für Patientenutensilien
- Verlastung einer Sauerstoffflasche
- 2 Halter für Gehhilfen



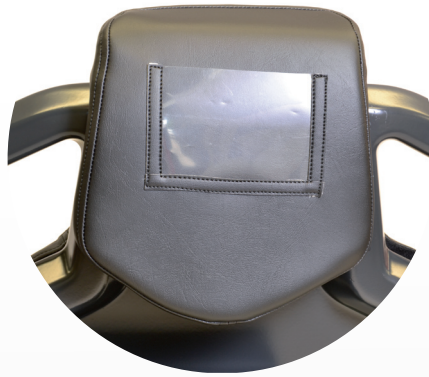

Tasche für Etiketten

Integrierte Armlehnen:

- erleichtert den Patiententransfer
- das Verankern mit dem fahrzeugseitigen Dreipunktgurt wird erleichtert.



aufklappbarer Infusionshalter



ausziehbare Fußstütze





ATOS

STAR



STANDARD Ausführung

Die Sitzschale besteht aus Glasfaser, ist in Grau RAL 7021 lackiert und hat eine völlig wegklappbare Armlehne links und rechts, welche im Rückenteil der Sitzschale integriert ist. Dadurch wird der Transfer des Patienten erleichtert, ohne die Stabilität der Sitzschale zu verlieren. Ebenso wird so das Anschnallen des Patienten mit dem fahrzeugseitigen 3-Punkt Gurt deutlich verbessert. Am Tragestuhl ist ein H-Gurt statisch fixiert.



Die Sitzpolsterung besteht aus einem Kunstlederbezug, welcher farblich ganz nach Kundenwunsch gestaltet werden kann. Er ist unempfindlich gegen handelsübliche Desinfektionsmittel. Die Fußstützen sind nach innen wegklappbar und ermöglichen so ein freies Aufstehen des Patienten. Das Untergestell besteht aus Aluminium und ist in der Farbe Grau RAL 7021 pulverbeschichtet.

Diese Version wurde speziell für den Einsatz in Kliniken konzipiert. Auf der Rückseite ist ein großes Fach für Patientenutensilien. Eine Sauerstoffflasche kann schnell verlastet werden. Weiters wurden auch 2 Halter für Gehhilfen installiert. Seitlich kann eine Infusionshalterung aufgeklappt werden. Dadurch können Patienten nicht nur schnell innerhalb der Klinik transportiert werden, sondern auch in einem Rettungsfahrzeug verlastet werden, ohne den Patienten „umzulagern“.



Zubehör / Optionen

- H- Gurt statisch
- Ausführung ohne H-Gurt
- Beckengurt mit Rollautomatik
- Orthopädisch geformtes Sitzkissen
- Sitzbezug in Kunstleder: Einfarbige Varianten in ORANGE, ROT, BLAU, SCHWARZ, oder Wunschfarbe auf Anfrage
- Zweifarbige Variante: Sitzfläche & Rückenteil in SCHWARZ - Randbereich in Wunschfarbe

Fußstütze ausgezogen

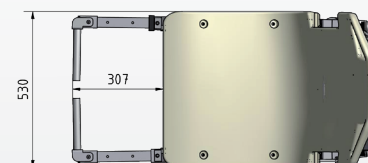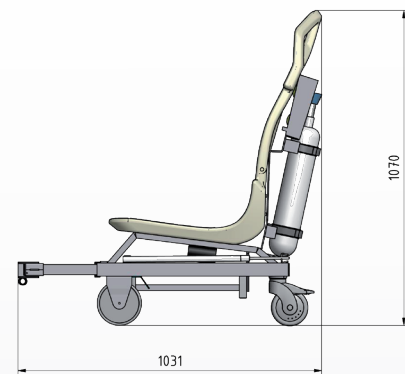

Fußstütze geschlossen

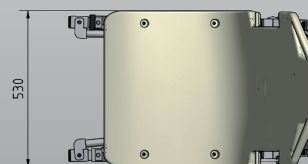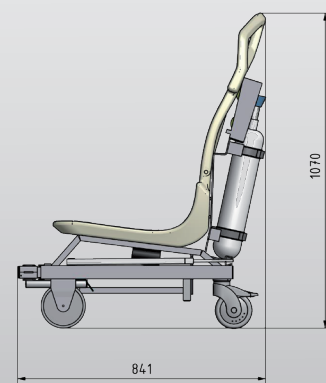

ATOS Group GmbH
4845 Rutzenmoos, Unterkriech 34
Tel.: +43 (0)7672 / 222 33
Fax.: +43 (0)7672 / 222 33 44

Kontakt:
Schiemer Michael
+43 (0)664 / 333 97 23
Email: office@atos-ambulanz.at

